



DEXIS™



DEXIS™ IS Connect

사용설명서(For Clinic)



DEXIS™

목차

치과용(For Clinic)

챕터 1

DEXIS IS ScanFlow 계정 생성 -----3

챕터 2

DEXIS IS Connect 서비스 접속 -----5

챕터 3

DEXIS IS Connect 기공소와의 연결 -----8

기공소용(For Lab)

챕터 4

DEXIS IS Connect 계정 생성 -----10

챕터 5


DEXIS IS Connect 파트너 수락 -----15



DEXIS™

1. DEXIS IS ScanFlow 계정 생성

* 만들어진 계정이 있다면 [5페이지](#)를 참고하시기 바랍니다.

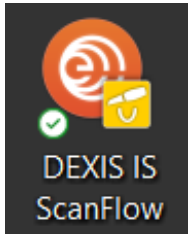

“DEXIS IS ScanFlow”에 접속하여 계정 생성



Sign in with your email address

Email Address

Password

[Forgot your password?](#)

Sign in

Don't have an account?

[Sign up now](#)

“Sign up now” 클릭

< Cancel



Verification is necessary. Please click Send button.

isconnectclinic12@outlook.com

①

① 사용할 이메일 주소를 기입

Send verification code

②

② “Send verification code” 클릭

New Password

Confirm New Password


Given Name

Surname


Create




DEXIS™

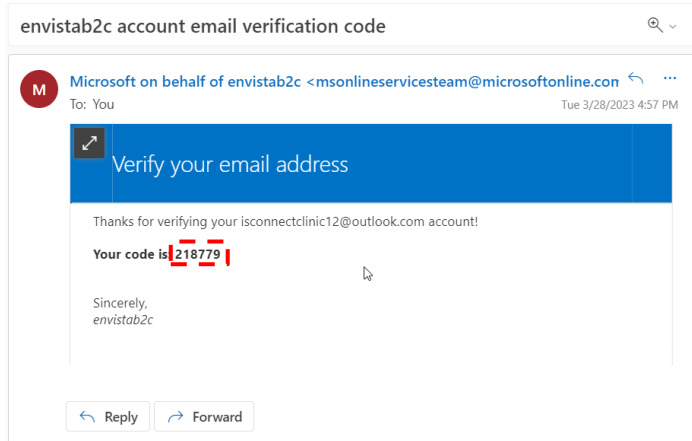

기입한 이메일 주소 메일함에서
“검증코드” 메일을 확인하여
주시기 바랍니다.

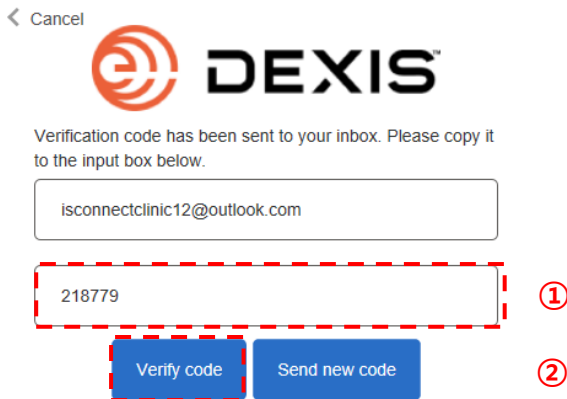

- ① 코드 기입
- ② “Verify code” 클릭

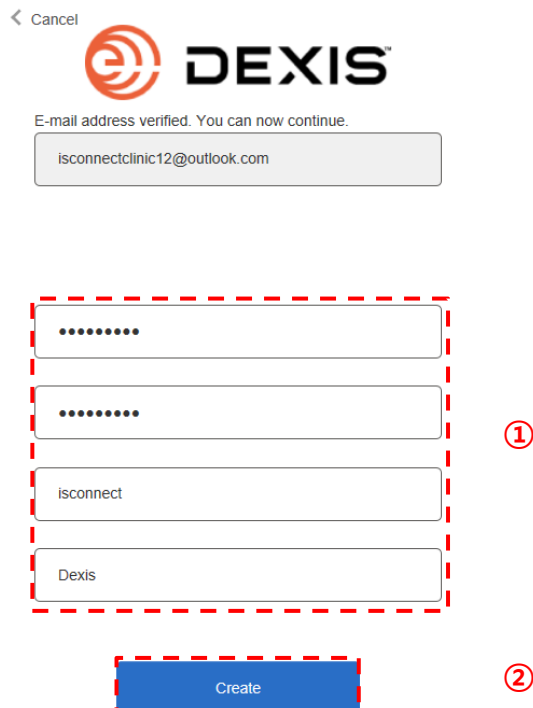


- ① 비밀번호 및 이름, 성 기입
- ② “Create” 클릭



DEXIS™

2. DEXIS IS Connect 서비스 접속

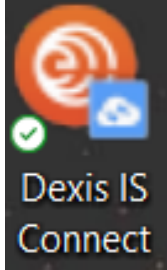

“Dexis IS Connect”에 접속하여 로그인

기타 접속 옵션

- 바탕화면의 아이콘을 더블 클릭하여 접속
- Dexis IS ScanFlow을 통하여 접속
- 인터넷 주소(dentalconnect.dexis.com)로 접속



“서비스에 접속하기” 클릭



DEXIS™

sign in name(으)로 로그인

암호를 잊으셨습니까?

로그인

계정이 없습니까? [지금 등록하세요.](#)

DEXIS IS ScanFlow 계정으로 로그인



DEXIS™

첫 번째 접속
환영합니다 > 의사 > 병원 > 이용 약관

DEXIS IS Connect에 오신 것을 환영합니다!
프로필을 작성하고 서비스 이용약관에 동의해야 합니다.

< 이전 다음 >

“다음” 클릭

첫 번째 접속
환영합니다 > 의사 > 병원 > 이용 약관

애플리케이션 설정에서 프로필을 편집할 수 있습니다. * 표는 필수 입력 필드입니다.

이메일 isconnectclinic12@outlook.com

성 * Dexis

이름 * isconnect

면허 번호

타이틀

전문과목

휴대 전화 번호

웹사이트

< 이전 다음 >

①

① 성, 이름 기입

② “다음” 클릭

②



DEXIS™

첫 번째 접속
환영합니다 > 의사 > 병원 > 이용 약관

* 표는 필수 입력 필드입니다.

병원 상호 * Dexis

주소 * 서울 구로구 디지털로 31길

상세주소

도시 * 서울

주

우편 번호 * 08380

국가 * Korea (South)

< 이전 다음 >

①

① 병원 상호, 주소, 도시, 우편 번호, 국가 기입

② “다음” 클릭

②

첫 번째 접속
환영합니다 > 의사 > 병원 > 이용 약관

아래 버튼을 클릭하면 서비스 [이용 약관](#) 및 [개인정보 보호 정책](#)에 동의하는 것으로 간주됩니다.

< 이전 수락

“수락” 클릭



3. DEXIS IS Connect 기공소와의 연결



“파트너” 클릭

파트너

기공소 | 씨드파티

파트너가 없습니다.

[파트너 추가](#)

파트너

초대를 원하는 기공소로 이메일이 발송됩니다. 아래에서 초대 내용을 수정할 수 있습니다:

이메일 * isconnectlab12@outlook.com

메시지 * 안녕하세요, DEXIS입니다.

17 / 500 문자

취소 전송

“파트너 추가” 클릭

- ① 파트너를 추가할 기공소 이메일 기입
- ② 필요시 메시지 입력
- ③ “전송” 클릭

파트너

기공소 | 씨드파티

신규: 새로운 파트너 1명.

Dexisconnectlab
isconnectlab12@outlook.com **새로운 파트너**

파트너십 유지증-최초일: 28/03/2023
제출된 케이스: 0

원 영식 사물 **파일 영식 첨부**

완료

※기공소에서 수락 시 보여지는 화면



DEXIS™



DEXIS™ IS Connect

사용설명서(For Lab)




DEXIS™

4. DEXIS IS Connect 계정 생성



메일함을 확인하시어 **파란 링크**
(dentalconnect.dexis.com)로
접속하시기 바랍니다.

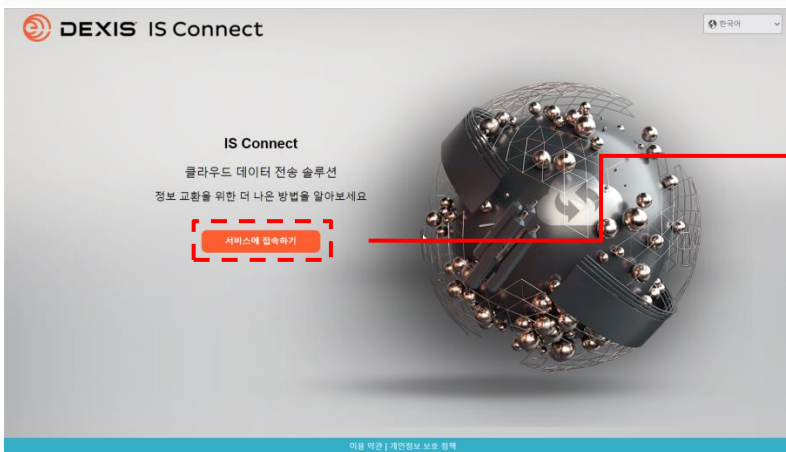

“서비스에 접속하기” 클릭



DEXIS™

sign in name(으)로 로그인

암호를 잊으셨습니까?

계정이 없습니까? **지금 등록하세요.**

“지금 등록하세요” 클릭하여 계정 생성



DEXIS™

< 취소



DEXIS™

확인이 필요합니다. [보내기] 단추를 클릭하세요.

Email Address

확인 코드 보내기

New Password

Confirm New Password

Given Name

Surname

계속

초대 메일이 왔던 이메일 주소 기입

< 취소



DEXIS™

확인이 필요합니다. [보내기] 단추를 클릭하세요.

isconnectlab12@outlook.com

확인 코드 보내기

New Password

Confirm New Password

Given Name

Surname

계속

“확인 코드 보내기” 클릭

이메일 주소 확인

회원님의 isconnectlab12@outlook.com 계정을 확인해 주셔서 감사합니다.

회원님의 코드: **652780**

감사합니다.
envistab2c

기입한 이메일 주소 메일함에서
“검증코드” 메일을 확인하여
주시기 바랍니다.



DEXIS™

< 취소



DEXIS™

받은 편지함으로 확인 코드를 보냈습니다. 확인 코드를 아래 입력란에 복사하세요.

isconnectlab12@outlook.com

652780

코드 확인

새 코드 보내기

①

① 인증 코드 기입

②

② “코드 확인” 클릭

New Password

Confirm New Password

Given Name

Surname

계속

< 취소



DEXIS™

이메일 주소를 확인했습니다. 이제 계속할 수 있습니다.

isconnectlab12@outlook.com

isconnectlab

Dexis

①

① 비밀번호 및 이름, 성 기입

② “계속” 클릭

계속

②



DEXIS™

첫 번째 접속
환영합니다 > 사용자 계정 > 제출 양식 > 이용 약관

DEXIS IS Connect에 오신 것을 환영합니다!
프로필을 작성하고 서비스 이용약관에 동의해야 합니다.

< 이전 다음 >

“다음” 클릭

첫 번째 접속
환영합니다 > 사용자 계정 > 제출 양식 > 이용 약관

애플리케이션 설정에서 프로필을 편집할 수 있습니다. * 표는 필수 입력 필드입니다.

이름 * Dexasconnectlab

< 이전 다음 >

①

① 이름 기입

② “다음” 클릭

②



DEXIS™

첫 번째 접속

환영합니다 > 사용자 계정 > 제출 양식 > 이용 약관

아래에 하나 이상의 제출 양식을 첨부하십시오.

제출 양식
0 / 20 Mb

양식 첨부

< 이전

다음 >

“다음” 클릭

첫 번째 접속

환영합니다 > 사용자 계정 > 제출 양식 > 이용 약관

아래 버튼을 클릭하면 서비스 [이용 약관](#) 및 [개인정보 보호 정책](#)에 동의하는 것으로 간주됩니다.

< 이전

수락

“수락” 클릭




DEXIS™


5. DEXIS IS Connect 파트너 수락




“파트너” 클릭

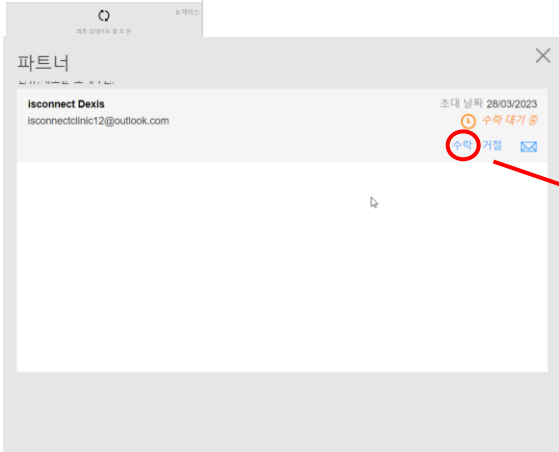

“수락” 클릭

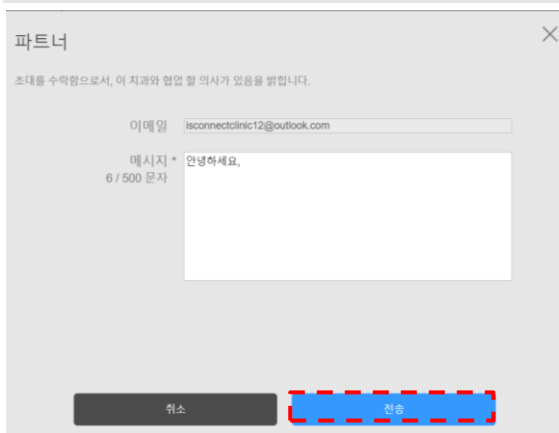

“전송” 클릭

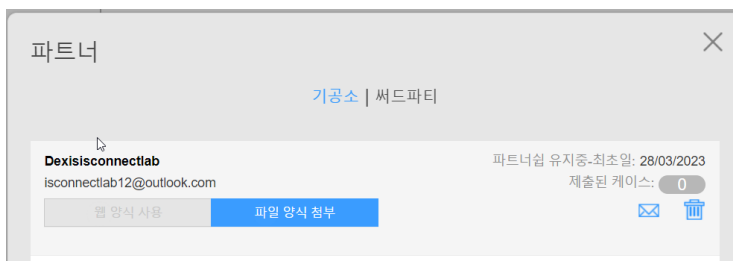


완료

※ 파트너십 완료 후 보여지는 화면



DEXIS™

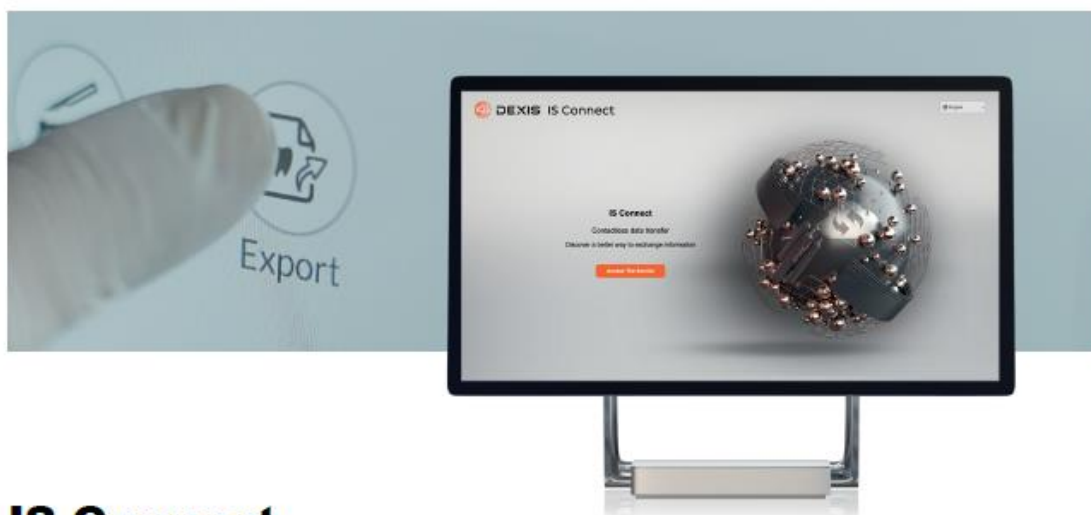

IS Connect

Export your way

Export data with one click using your preferred export format, including STL, PLY, OBJ, DWOS XOrder, and exocad Dental project.

Say goodbye to courier issues

Reduce shipping costs and delays, manual tasks and streamline your data transmission.

A safer alternative

Digital file transfer helps keep everyone safe and healthy by eliminating the multiple manual touchpoints related to producing and shipping manual impressions.

Real time updates

Keep you and your patients up to date by checking the status of any case online from any computer with internet access.

Upload and access files when it suits

Both you and your chosen lab can upload and access files whenever it's convenient. Plus, all cases are retained for one year, so it's always available when you need it.

Third-party printer integration

You're always one click away from printing software with IS Connect. Easily turn your prepared model from IS ScanFlow into a prepared 3D model print.

IS WebViewer

The cloud-based platform allows your chosen lab or manufacturer to view and interact with the 3D dataset in full HD color and in real time – even from a mobile device. Also included are orientation adjustment tools, snapshot capture and occlusion proximity tools which provide advanced adjustment, review and export capabilities.

Quick Connect Partners

Quick Connect Partners are labs and manufacturers that are established DEXIS IS collaborators. Using one of these partners means you can send files with a single click and see smoother case transmissions.